

# LuxLift

AGELESS BEAUTY

## LEDER DU EFTER MANUALEN PÅ DIT SPROG?

Ønsker du brugermanualen på et andet sprog?  
→ Scan denne QR-kode med dit telefonkamera.



# LuxLift

AGELESS BEAUTY

## EN KORT HISTORIE OM LYSTERAPI

Brugen af lysterapi i behandling og helbredelse er ikke et nyt koncept. Nobelprisen blev tildelt Niels Ryberg Finsen i 1903 for hans arbejde med rød lysterapi til at kurere kopper og lupus. I 1960'erne blev laserbaseret lysterapi anvendt i mange kliniske og eksperimentelle sammenhænge og var ansvarlig for store gennembrud inden for ikke-invasiv sygdomsbehandling.

Et yderligere gennembrud skete i 1990'erne, da NASA begyndte at arbejde på at bruge LED-baserede lysterapiapparater til brug i sårheling for astronauter, da sår tager længere tid at hele under ændrede tyngdekraftsforhold. Deres forskning banede vejen for Photonic Lights Canine Therapy Tec® lysterapiapparatet, som tager det bedste fra de nuværende tilgængelige terapeutiske lysterapisystemer og kombinerer dem i ét brugervenligt og bærbart helingssystem.


Mange fysiologiske processer afhænger af lyscyklussen. Der er særlige fotoreceptive molekyler i vores celler kaldet cytochrom c-oxidaser, som er enzymer i mitokondriernes respirationskæde. Mitokondrier er cellulære organeller, der leverer cellulær energi. Cytochrom c-oxidaser absorberer lys i det fototerapeutiske vindues røde og nær-infrarøde spektrum, hvilket udløser en række redoxreaktioner på den indre mitokondrielle membran. Den fotobiologiske reaktion fra disse primære mekanismer er tydelig i fotosignaltransduktionen til sekundære mekanismer, der sikrer adskillige kliniske effekter: sårheling, forbedret blod- og lymfecirkulation, regenerering og immunmodulering.

## HVAD SKER DER I KROPPEN, NÅR TERAPEUTISK LYS BRUGES

Fotobiomodulation giver organismen essentiel støtte til at opretholde kroppens homeostase. Dette gælder især for det røde og nær-infrarøde spektrum. Lys bidrager til at opretholde eller genetablere balancen i organismen på et jævnt celleniveau, hvor lyset fungerer som en antioxidant, der hjælper med at beskytte cellerne mod frie radikaler.

## LuxLift AGELESS BEAUTY® leveres med:

- 1 x LuxLift AGELESS BEAUTY Light Mask®
- 1 x Kontrolpanel inkl. powerbank
- 2 x øjenbeskyttelse sort
- 1 x Fastgørelsesbånd med velcro
- 1 x Hvid velour støvpose
- 1 x Brugermanual

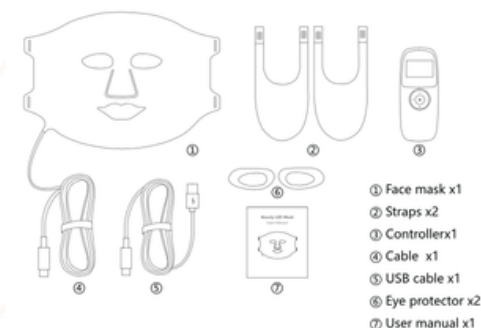

## TEKNISKE OPLYSNINGER

- 1 x LuxLift AGELESS BEAUTY®
- 4 forskellige bølgelængder
- 24 kombinationer
- 415 nm Safirblå
- 525 nm Opalgrøn
- 630 nm Rubinrød
- 850 nm perlelyserød infrarød
- 368 medicinske LED-bestrålingsstyrke 22-60 mW/cm<sup>2</sup>
- LED-lysets levetid på 50.000 timer
- 2 års garanti fra købsdatoen CE-godkendt

LuxLift Ageless Beauty® er designet til kosmetisk velvære og til at understøtte en professionel hudplejerutine derhjemme. Den er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge sygdomme, og den erstatter ikke lægehjælp. Hvis du er under lægebehandling eller er usikker på, om du bør bruge lysbaserede behandlinger, skal du kontakte din læge.

## KONTAKTE

Caball Therapy Systems/CTS

Tlf.: +45 2815 5676

E-mail: [post@caball.biz](mailto:post@caball.biz)

Hjemmeside: [www.caball.biz](http://www.caball.biz)

Forhandler- og behandlerside: [www.cts-reseller.com](http://www.cts-reseller.com)

ADVARSEL! BRUG KUN DE LEDNINGER, ADAPTERE ELLER POWERBANK, DER LEVERER MED ENHEDEN. ANDRE POWERBANKS TIL CONTROLLER OG ADAPTERE VIL BESKADIGE ENHEDEN OG ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN.

Bemærk venligst, at powerbankens levetid er begrænset. Batterikapaciteten reduceres under brug. Hjælp med at skåne miljøet ved at returnere den genopladelige powerbank til en indsamlings- og genbrugsstation.

### **GARANTI**

Dette produkt leveres med 2 års leveringsgaranti fra købsdatoen, forudsat at original købsbevis fremvises. INGEN garantikrav som følge af påført skade, utilsigtet tab, vandskade eller skade forårsaget af organiske opløsningsmidler.



Det kan påvirke de proteiner, der beskytter celler mod degenerative processer.

Øger den osmotiske resistens i røde blodlegemer og kan forhindre øget hæmolyse.

Påvirker vækstfaktorerne i nervesystemet og mikrokarrene samt muskel- og bindevæv.

Påvirker celledsignaler, regulerer inflammation, immunrespons og døgnrytme.

Understøtter vævsregenerering, stimulerer lokal blodcirkulation og stimulerer lymfesystemet.

Terapeutisk lys påvirker mekanismerne for sygdommens opståen og forkorter restitutionstiden betydeligt. Det hjælper dermed med at reducere medicinske omkostninger, da det er muligt at reducere brugen af medicin. Terapeutisk lys kan ikke erstatte en holistisk livsstil og medicinsk behandling, der kræves for skader eller sygdomme, men komplementære effekter er blevet bevist. Det oplyste område viser bedre blodcirkulation, cellulær metabolisme og energiproduktion i celler forbedres, og de helende og regenerative effekter på vævet stimuleres. På fagsprog kaldes denne behandlingsform PhotoBioModulation (PBM).

**LuxLift AGELESS BEAUTY® virker ved at levere terapeutisk lys i omhyggeligt udvalgte, yderst effektive bølgelængder – hvilket er grunden til, at mange brugere kan opnå resultater med kortere sessioner.**

Du kan vælge mellem forskellige valgfrie protokoller afhængigt af dit mål og din hudtolerance. Nogle rutiner tager så lidt som 10 minutter og bruges typisk 3-4 gange om ugen eller én gang dagligt.

**LuxLift AGELESS BEAUTY® er udviklet med fokus på at imødekomme behovene og feedbacken fra vores professionelle kunder. Efter lanceringen af markedets første lysterapimaske i 2012 blev der identificeret ønsker om større individuelle tilpasningsmuligheder og flere bølgelængder. Vi har indarbejdet denne feedback i udviklingen af vores masker for at sikre, at de opfylder vores kunders specifikke behov og ønsker.**

## BRUGSANVISNING LUXLIFT AGELESS BEAUTY®

### Tænd/sluk-knap:

Hold knappen nede i 3 sekunder for at skifte til tænd/sluk-tilstand.

### Intensitetsknop (E):


Tryk kort for at justere og skifte mellem 3 intensitetsniveauer: Lav, Medium og Stærk.

### Tidsindstillingsknapperne (T):

Tryk på timerknapperne for at vælge det ønskede tidsinterval. Vælg mellem de 5 forudindstillede tider på 10 eller 20 minutter. Du kan følge din behandling på kontrolpanelet, og tiderne vil tælle ned, så du kan tilpasse den mest personlige behandlingsprotokol til dine behov.

### Knap til valg af bølgepap (M):

Klik her for at vælge mellem de forskellige bølgelængder (farver), du ønsker at bruge.

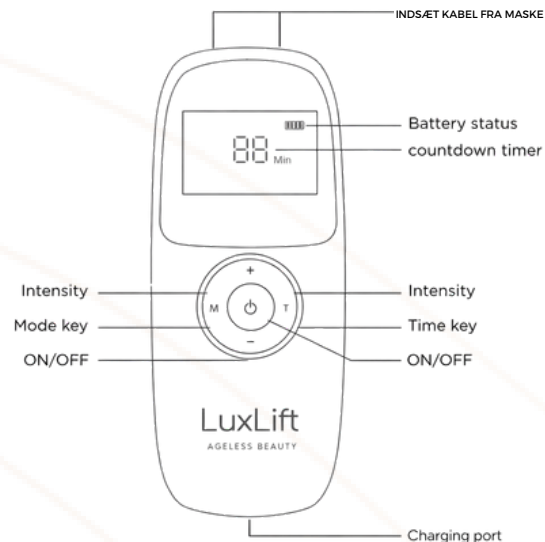

## RENGØRING, HYGIEJNE OG OPBEVARING

Rengør LuxLift ageless beauty® efter hver brug for at sikre god hygiejne og lang produktlevetid.

- Tør indersiden af masken af med et egnet, skånsomt rengøringsprodukt.
- Brug om nødvendigt leucillin eller et mildt kirurgisk desinfektionsmiddel, der er kompatibelt med medicinsk silikone.
- Lad masken tørre helt, før du lægger den tilbage i posen/æskan.
- Nedsenk ikke kontrolenheden, kablet eller opladningsporten i vand.
- Opbevar produktet tørt, støvfrit og væk fra direkte sollys.

**Vigtig hygiejnebemærkning: LuxLift Ageless Beauty® er ikke steril. Sørg for, at masken rengøres og desinficeres før og efter hver session, hvis der kræves yderligere barrierebeskyttelse. Hvis der kræves yderligere barrierebeskyttelse, skal maskens overflade dækkes med steril plastfilm for at reducere risikoen for kontaminering. Følg altid standard hygiejneprocedurer og passende vejledning til sårpleje.**

## KONTRAINDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER

### Epilepsi / lysfølsomhed

Nogle undersøgelser tyder på, at blinkende eller pulserende synligt lys i området 5-10 Hz kan udløse anfald hos modtagelige personer. LuxLift ageless beauty® er ikke designet til at pulsere inden for området 5-10 Hz. Hvis du har epilepsi, en historie med anfald eller udtalt lysfølsomhed, skal du dog være ekstra forsigtig:

- Undgå at se direkte ind i LED'erne/lysudgangen
- brug de medfølgende øjenskærme
- start med lav intensitet og kort tid
- ophør med brugen med det samme, hvis du føler ubehag, svimmelhed, hovedpine eller synsforstyrrelser

Hvis du er usikker, skal du kontakte din læge før brug.

### Kræft

LuxLift ageless beauty® er beregnet til kosmetisk velvære og må ikke anvendes på områder med kendt eller mistænkt kræft eller på uforklarlige hudlæsioner. Hvis du er i kræftbehandling eller opfølgende behandling, skal du kontakte din læge før brug.

### Diabetes

Personer med diabetes kan have øget hudfølsomhed og langsommere restitution efter irritation. LuxLift ageless beauty® kan bruges som en del af en skånsom hudplejerutine, men ekstra pleje anbefales:

- start med lav intensitet og kort tid
- overvåg hudens reaktion nøje
- Undgå at bruge enheden på områder med nedsat følesans, medmindre det er anbefalet af en sundhedsperson

Brug ikke LuxLift ageless beauty® direkte på åbne sår, mavesår, snitsår eller beskadiget hud. Ved sår eller tegn på infektion, søg lægehjælp og følg standard sårplejevejledning.

## SÅDAN BEHANDLER DU MED LuxLift AGELESS BEAUTY®

Før du bruger LuxLift ageless beauty®, skal du oplade kontrolpanelets batteri. Batteriindikatorsymbolet blinker under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, viser displayet et symbol for fuldt batteri, og indikatorlampen lyser konstant.

oplad i mindst 4-5 timer før første brug.

### FORBEREDELSE FØR EN LUXLIFT-SESSION:

- Rens grundigt. Fjern makeup, olie, SPF og urenheder.
- Huden skal være ren og tør før behandling.
- Valgfri toner.
- Vælg en mild toner uden stærke syrer eller aggressive ingredienser
- Serum (kun vandbaseret - valgfrit). Et let, vandbaseret serum kan anvendes, så længe det ikke indeholder lysfølsomme eller irriterende ingredienser.
- Vælg en protokol. Vælg en protokol baseret på den ønskede oplevelse/effekt (f.eks. glød, beroligende, balance, ujævn tone).

### EFTERBEHANDLING: MAKSIMER KOMFORT OG GLØD

- Følg op med Lumiereva Korean Collagen Sheet Mask®.
- For optimal hydrering og et synligt glattere og fyldigere udseende anbefales Lumiereva efter din LuxLift-behandling.
- Caseobservationer viser meget positive resultater ved brug af Lumiereva efter LuxLift, da huden kan være mere modtagelig for fugt efter behandlingen.
- Påfør din foretrukne dag- eller natcreme. Vælg en fugtighedscreme, der understøtter hudens barriere.
- Nyd følelsen. Mange brugere rapporterer at deres hud føles roligere, blødere og mere strålende i flere timer efter en session.



## LuxLift Ageless Beauty® – 24 protokoller

Version 3.0 • Opdateret 23. februar 2026 • CaballTherapySystems (CTS)

Protocol name (unique)	#	Light selection	Tid	Intensity	Anbefalet brug
Ruby Radiance Start	1	Ruby Red	10 min	Low	Mild glødestarter + frisk hud
Ruby Smooth Boost	2	Ruby Red	10 min	Medium	Glattere finish + raffineret tekstur
Ruby Firming Focus	3	Ruby Red	10 min	High	Den fastere hudrutine til erfarne brugere
Ruby Fine Line Softener	4	Ruby Red	20 min	Low	Understøtter fine linjer + komfortbehandling
Ruby Collagen Support Deep	5	Ruby Red	20 min	Medium	Kollagen-understøttende hud + fyldigere hud
Ruby Elasticity Builder	6	Ruby Red	20 min	High	Avanceret elasticitet/låst udseende + glød
Ruby Infra Pump Start	7	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Fyldigt udseende + fugtighedsvenlig finish
Ruby Infra Glow Veil	8	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Glød + glat finish + "glashud"-følelse
Ruby Infra Lift Boost	9	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	High	Løftet, strålende finish (erfarne brugere)
Ruby Infra Barrier Comfort	10	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Komfortbehandling + blød, rolig glød
Ruby Infra Line Smoother	11	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Understøtter fine linjer + fyldigt udseende
Ruby Infra Firm & Pump Deep	12	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	High	Den avancerede fastere hudrutine + fyldigt udseende + glød
Sapphire Blenish Start	13	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Mild start til hud med tendens til urenheder + klarere finish
Sapphire Oil Balance Sapphire	14	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Hjælper med at reducere overskydende glans
Breakout Focus Sapphire Pore	15	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	High	Intensiv behandling af synlige urenheder (erfarne brugere)
Refining Sapphire Texture	16	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Raffinerede porer + glattere tekstur
Soothing Sapphire Clarity	17	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Glattere tekstur + glattere finish
Deep Opal Calm – Stress	18	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	High	Avanceret klarhedsrutine + raffineret hudtone
Reset Opal Calm – Redness	19	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Rolig finish til stresset/sensitiv hud
Relief Opal Calm – Recovery	20	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Understøtter synlige rødmeeffekter + komfort
Boost Opal Soothe – Deep	21	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	High	Stærk lindrende behandling (erfarne brugere)
Recovery Opal Balance –	22	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Stresset hudfølelse + rolig tone
Calm Tone Opal Serenity –	23	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Rolig + glattere tone
Calm Glow	24	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	High	Avanceret rolig glød + afbalanceret finish

### FORSIGTIGHED:

Hudplejeprodukter, sensitive ingredienser og fotosensibiliserende medicin. Lysbaseret hudpleje er typisk skånsom, men kombination med visse hudplejeprodukter eller medicin kan øge hudens følsomhed. Dette kan øge risikoen for rødme, varme, prikken, irritation eller ubehag.

### A) Ingredienser, du generelt bør undgå samme dag som PBM

- Retinol/retinoider (retinol, retinal, tretinoin, adapalen osv.)
- AHA-syrer (glykolsyre, mælkesyre, mandelsyre)
- BHA (salicylsyre) og stærke eksfolierende pads/produkter
- Benzoylperoxid
- Højstyrkende C-vitamin i formler med lav pH (især lascorbinsyre)
- Skrubber og stærke rensmidler, der indeholder eksfolierende syrer

Hvorfor undgå disse? Disse aktive ingredienser kan øge hudens reaktivitet, midlertidigt svække hudbarrieren og intensivere fornemmelser (varme/prikken) under en let behandling. Dette kan føre til ubehag, rødme eller irritation. For den bedste komfort, planlæg LuxLift på 'blide dage': rens + mild toner + valgfri vandbaseret serum + LuxLift + Lumiereva + hydrering.

### FOTOSENSIBILISERENDE MEDICIN

Fotosensibiliserende medicin og behandlinger (vigtigt) Nogle lægemidler og kliniske hudbehandlinger kan øge fotosensibilisationen.

Hvis du bruger fotosensibiliserende medicin, skal du være ekstra forsigtig, og kontakte en læge, hvis du er i tvivl. Start meget forsigtigt (lav intensitet og kort tid), og stop brugen, hvis du føler ubehag.