

LuxLift

AGELESS BEAUTY

LETER DU ETTER MANUALEN PÅ DITT SPRÅK?

Ønsker du brukermanualen på et annet språk?

→ Skann denne QR-koden med telefonkameraet ditt.



LuxLift

Ageless Beauty

EN KORT HISTORIE OM LYSTERAPI

Bruken av lysterapi i behandling og helbredelse er ikke et nytt konsept. Nobelprisen ble tildelt Niels Ryberg Finsen i 1903 for hans arbeid med rød lysterapi for å kurere kopper og lupus. I løpet av 1960-årene ble laserbasert lysterapi brukt i mange kliniske og eksperimentelle sammenhenger og var ansvarlig for store gjennombrudd innen ikke-invasiv sykdomsbehandling. Et ytterligere gjennombrudd skjedde på 1990-tallet da NASA begynte å jobbe med å bruke LED-baserte lysterapiapparater til bruk i sårheling for astronauter, ettersom sår tar lengre tid å gro under endrede tyngdekraftsforhold. Forskningen deres banet vei for lysterapiapparatet Photonic Lights Canine Therapy Tec[®], som tar det beste av dagens tilgjengelige terapeutiske lysterapisystemer og kombinerer dem i ett brukervennlig og bærbart helingssystem.


Mange fysiologiske prosesser er avhengige av lyssyklusen. Det finnes spesielle fotoreseptive molekyler i cellene våre kalt cytokrom c-oksidaser, som er enzymer i mitokondrienes respirasjonskjede. Mitokondrier er cellulære organeller som gir cellulær energi. Cytokrom c-oksidaser absorberer lys i det fototerapeutiske vinduet rødt og nær-infrarødt spektrum, og utløser en sekvens av redoksreaksjoner på den indre mitokondriemembranen. Den fotobiologiske responsen til disse primære mekanismene er tydelig i fotosignaltransduksjonen til sekundære mekanismer som sikrer flere kliniske effekter: sårheling, forbedret blod- og lymfesirkulasjon, regenerering og immunmodulering.

HVA SKJER I KROPPEN NÅR TERAPEUTISK LYS BRUKES

Fotobiomodulering gir organismen viktig støtte for å opprettholde kroppens homeostase. Dette gjelder spesielt for det røde og nær-infrarøde spekteret. Lys bidrar til å opprettholde eller gjenopprette balansen i organismen på et jevnt cellenivå, hvor lyset fungerer som en antioksidant som bidrar til å beskytte cellene mot frie radikaler.

LuxLift AGELESS BEAUTY[®] leveres med:

- 1 x LuxLift AGELESS BEAUTY lysmaske[®]
- 1 x Kontrollpanel inkl. powerbank
- 2 x øyebeskyttelse svart
- 1 x Festebånd med borrelås
- 1 x hvit støvpose i velour
- 1 x Brukermanual

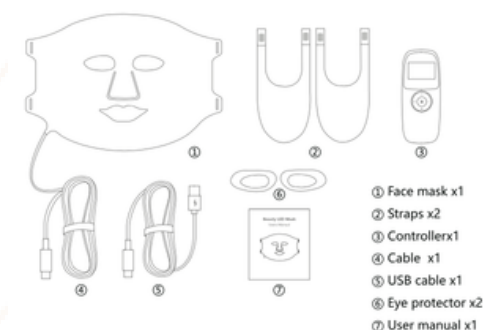

TEKNISK INFORMASJON

- 1 x LuxLift AGELESS BEAUTY[®]
- 4 forskjellige bølgelengder
- 24 kombinasjoner
- 415 nm safirblå
- 525 nm opalgrønn
- 630 nm Rubinrød
- 850 nm perlerosa infrarød
- 368 medisinske LED-bestrålingsstyrke 22–60 mW/cm²
- 50 000 timers levetid for LED
- 2 års garanti fra kjøpsdato CE-godkjent

LuxLift Ageless Beauty[®] er utviklet for kosmetisk velvære og for å støtte en profesjonell hudpleierutine hjemme. Den er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge sykdom, og den erstatter ikke medisinsk rådgivning. Hvis du er under medisinsk behandling eller er usikker på om du bør bruke lysbaserte behandlinger, bør du kontakte legen din.

KONTAKT

Caball Therapy Systems/CTS

Tlf: +45 2815 5676

E-post: post@caball.biz

Nettsted: www.caball.biz

Forhandler- og behandlernettssted: www.cts-reseller.com

ADVARSEL! BRUK KUN LEDNINGENE, ADAPTEREN ELLER POWERBANKEN SOM FØLGER MED ENHETEN. ANDRE POWERBANKER OG ADAPTERE TIL KONTROLLER VIL SKADE ENHETEN OG DEKKES IKKE AV GARANTIEN.

Vær oppmerksom på at powerbankens levetid er begrenset.

Batterikapasiteten reduseres ved bruk. Hjelp med å bevare miljøet ved å returnere den oppladbare powerbanken til et innsamlings- og resirkuleringscenter.

GARANTI

Dette produktet leveres med 2 års leveringsgaranti fra kjøpsdatoen, forutsatt at original kjøpsbevis fremvises. INGEN garantikrav som følge av påført skade, utilsiktet tap, vannskade eller skade forårsaket av organiske løsemidler.



Det kan påvirke proteinene som beskytter cellene mot degenerative prosesser.

Øker den osmotiske resistensen til røde blodlegemer og kan forhindre økt hemolyse.

Påvirker vekstfaktorene i nervesystemet og mikrokarene samt muskel- og bindevev.

Påvirker celledesignering, regulerer betennelse, immunrespons og døgnrytme.

Støtter vevsregenerering, stimulerer lokal sirkulasjon og stimulerer lymfesystemet.

Terapeutisk lys påvirker mekanismene for sykdomsutvikling og forkorter rekonvalesenstiden betydelig. Det bidrar dermed til å redusere medisinske kostnader, ettersom det er mulig å redusere bruken av medisiner.

Terapeutisk lys kan ikke erstatte en helhetlig livsstil og medisinsk behandling som kreves for skader eller sykdommer, men komplementære effekter har blitt bevist. Det opplyste området viser bedre sirkulasjon, cellemetabolisme og energiproduksjon i cellene forbedres, og de helbredende og regenerative effektene på vevet stimuleres. På fagspråket kalles denne behandlingsformen PhotoBioModulation (PBM).

LuxLift AGELESS BEAUTY® fungerer ved å levere terapeutisk lys i nøye utvalgte, svært effektive bølgelengder – og det er derfor mange brukere kan oppnå resultater med kortere behandlinger.

Du kan velge mellom ulike valgfrie protokoller avhengig av målet ditt og hudens toleranse. Noen rutiner tar så lite som 10 minutter, og brukes vanligvis 3–4 ganger per uke eller én gang daglig.

LuxLift AGELESS BEAUTY® er utviklet med fokus på å møte behovene og tilbakemeldingene fra våre profesjonelle kunder. Etter lanseringen av markedets første lysterapimaske i 2012 ble det identifisert ønsker om større individuelle tilpasningsmuligheter og flere bølgelengder. Vi har innlemmet denne tilbakemeldingen i utviklingen av maskene våre for å sikre at de oppfyller kundenes spesifikke behov og ønsker.

BRUKSANVISNING LUXLIFT AGELESS BEAUTY®

Av/på-knapp:

Hold knappen inne i 3 sekunder for å bytte til av/på-modus.

Intensitetsknapp (E):


Kort trykk for å justere og veksle mellom 3 intensitetsnivåer: Lav, Middels og Sterk.

Tidsinnstillingsknappene (T):

Trykk på timerknappene for å velge ønsket tidsintervall. Velg mellom 5 forhåndsinnstilte tider, 10 eller 20 minutter. Du kan følge behandlingen på kontrollpanelet, og tidene vil telles ned, slik at du kan tilpasse den mest personlige behandlingsprotokollen til dine behov.

Knapp for valg av bølgepapp (M):

Klikk her for å velge mellom de forskjellige bølgepappene (fargene) du ønsker å bruke.

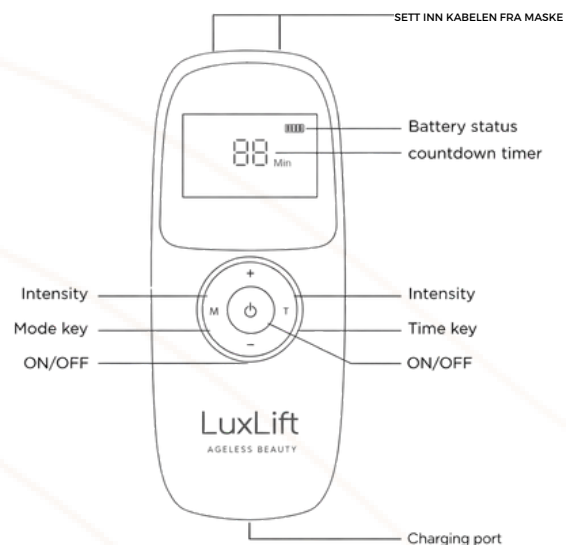

RENGJØRING, HYGIENE OG OPPBEVARING

Rengjør LuxLift ageless beauty® etter hver bruk for å sikre god hygiene og lang produktlevetid.

- Tørk av innsiden av masken med et passende, skånsomt rengjøringsprodukt.
- Bruk om nødvendig leucillin eller et mildt kirurgisk spritdesinfeksjonsmiddel som er kompatibelt med medisinsk silikon.
- La masken tørke helt før du legger den tilbake i posen/esken.
- Ikke senk kontrollenheten, kabelen eller ladeporten i vann.
- Oppbevar produktet tørt, støvfritt og unna direkte sollys.

Viktig hygieneinformasjon: LuxLift Ageless Beauty® er ikke steril. For hygienisk bruk i nærheten av akneutsatte områder eller sårbandasjer, sørg for at masken rengjøres og desinfiseres før og etter hver behandling. Hvis det er behov for ekstra barrierebeskyttelse, dekk maskens overflate med steril plastfilm for å redusere risikoen for kontaminering. Følg alltid standard hygieneprosedyrer og passende veiledning for sårpleie.

KONTRAINDIKASJONER OG FORHOLDSREGLER

Epilepsi / lysfølsomhet

Enkelte studier tyder på at blinkende eller pulserende synlig lys i området 5–10 Hz kan utløse anfall hos mottakelige personer. LuxLift ageless beauty® er ikke utviklet for å pulsere i området 5–10 Hz. Men hvis du har epilepsi, en historie med anfall eller uttalt lysfølsomhet, bør du være ekstra forsiktig:

- unngå å se direkte inn i LED-lysene/lysutgangen
- bruk de medfølgende øyebeskyttelsene
- start med lav intensitet og kort tid
- avbryt bruken umiddelbart hvis du føler ubehag, svimmelhet, hodepine eller synsforstyrrelser

Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med legen din før bruk.

Kreft

LuxLift ageless beauty® er beregnet for kosmetisk velværebruk og må ikke brukes på områder med kjent eller mistenkt kreft eller på uforklarlige hudlesjoner. Hvis du gjennomgår kreftbehandling eller oppfølgingsbehandling, bør du rådføre deg med legen din før bruk.

Diabetes

Personer med diabetes kan ha økt hudfølsomhet og tregere restitusjon etter irritasjon. LuxLift ageless beauty® kan brukes som en del av en skånsom hudpleierutine, men ekstra forsiktighet anbefales:

- start med lav intensitet og kort tid
- overvåk hudens respons nøye
- Unngå å bruke enheten på områder med redusert følelse med mindre det er anbefalt av helsepersonell.

Ikke bruk LuxLift ageless beauty® direkte på åpne sår, magesår, kutt eller skadet hud. Ved sår eller tegn på infeksjon, kontakt lege og følg standard veiledning for sårpleie.

HVORDAN BEHANDLE MED LuxLift AGELESS BEAUTY®

Før du bruker LuxLift ageless beauty®, må du lade batteriet i kontrollpanelet. Batteriindikatorsymbolet vil blinke under lading. Når batteriet er fulladet, vil displayet vise et symbol for fullt batteri, og indikatorlampen vil lyse konstant. Lad i minst 4–5 timer før første gangs bruk.

FORBEREDELSE FØR EN LUXLIFT-ØKT:

- Rens grundig. Fjern sminke, olje, solfaktor og urenheter.
- Huden skal være ren og tørr før behandling.
- Valgfri toner.
- Velg en mild toner uten sterke syrer eller aggressive ingredienser
- Serum (kun vannbasert – valgfritt). Et lett, vannbasert serum kan brukes så lenge det ikke inneholder lysfølsomme eller irriterende ingredienser.
- Velg en protokoll. Velg en protokoll basert på ønsket opplevelse/effekt (f.eks. glød, beroligende, balanse, ujevn tone).

ETTERBEHANDLING: MAKSIMER KOMFORT OG GLØD

- Følg opp med Lumiereva Korean Collagen Sheet Mask®.
- For optimal fuktighet og et synlig glattere og fyldigere utseende, anbefales Lumiereva etter LuxLift-behandlingen.
- Kasusobservasjoner indikerer svært positive resultater ved bruk av Lumiereva etter LuxLift, ettersom huden kan være mer mottakelig for fuktighet etter behandlingen.
- Påfør din foretrukne dag- eller nattkrem. Velg en fuktighetskrem som støtter hudbarrieren.
- Nyt følelsen. Mange brukere rapporterer at huden deres føles roligere, mykere og mer strålende i flere timer etter en behandling.





LuxLift Ageless Beauty® – 24 protokoller

Version 3.0 • Oppdatert 23. feb. 2026 • CaballTherapySystems (CTS)

Protokollnavn	#	Light selection	Tid	Intensitet	Anbefalt bruk
Ruby Radiance Start	1	Ruby Red	10 min	Low	Mild glødestarter + frisk hud
Ruby Smooth Boost	2	Ruby Red	10 min	Medium	Jevnere finish + raffinert tekstur
Ruby Firming Focus	3	Ruby Red	10 min	High	Rulinen for fastere hud for erfarne brukere
Ruby Fine Line Softener	4	Ruby Red	20 min	Low	Stetter fine linjer + komfortbehandling
Ruby Collagen Support Deep	5	Ruby Red	20 min	Medium	Kollagenstøttende hud + fyldigere hud
Ruby Elasticity Builder	6	Ruby Red	20 min	High	Avansert elasticitet/fast utseende + glød
Ruby infra Plump Start	7	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Fyldig utseende + fuktighetsvennlig finish
Ruby infra Glow Veil	8	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Glød + glatt finish + «glasshud»-følelse
Ruby infra Lift Boost	9	Ruby Red + Pearl Pink Infra	10 min	High	Løftet, strålende finish (erfarne brukere)
Ruby infra Barrier Comfort	10	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Komfortbehandling + myk, rolig glød
Ruby infra Line Smoother	11	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Stetter fine linjer + fyldig utseende
Ruby infra Firm & Plump Deep	12	Ruby Red + Pearl Pink Infra	20 min	High	Rulinen for avansert fastere hud + fyldig utseende + glød
Sapphire Blemish Start	13	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Mild start for hud med tendens til urenheter + klarere finish
Sapphire Oil Balance	14	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Bidrar til å redusere overflødig glans + balansert utseende
Sapphire Breakout Focus	15	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	10 min	High	Intensiv behandling for synlige urenheter (erfarne brukere)
Sapphire Pore Refining	16	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Raffinerte porer + glattere tekstur
Sapphire Texture Smoothing	17	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Jevnere tekstur + jevnere finish
Sapphire Clarity Deep	18	Sapphire Blue + Pearl Pink Infra	20 min	High	Avansert klarhetsrutine + raffinert hudtone
Opal Calm – Stress Reset	19	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	Low	Rolig finish for stress/sensitiv hud
Opal Calm – Rødhetslindring	20	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	Medium	Stetter synlige rødhetsflekker + komfort
Opal Calm – Recovery Boost	21	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	10 min	High	Sterk beroligende behandling (erfarne brukere)
Opal Soothe – Dyp restitusjon	22	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	Low	Stresspåvirket hudfølelse + rolig tone
Opal Balance – Rolig tone	23	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	Medium	Rolig + jevnere tone
Opal Serenity – Rolig glød	24	Opal Green (525 nm) + Pearl Pink Infra	20 min	High	Avansert rolig glød + balansert finish

FORSIKTIGHET:

Hudpleieprodukter, sensitive ingredienser og fotosensibiliserende medisiner Lysbasert hudpleie er vanligvis skånsom, men å kombinere den med visse hudpleieprodukter eller medisiner kan øke hudfølsomheten. Dette kan øke risikoen for rødhet, varme, prikking, irritasjon eller ubehag.

A) Ingredienser du vanligvis bør unngå samme dag som PBM

- Retinol/retinoider (retinol, retinal, tretinoin, adapalen, etc.)
- AHA-syrer (glykolsyre, melkesyre, mandelsyre)
- BHA (salisylsyre) og sterke eksfolierende pads/produkter
- Benzoylperoksid
- Høykonsentrert vitamin C i formler med lav pH (spesielt laskorbinsyre)
- Skrubb og sterke rensemidler som inneholder eksfolierende syrer

Hvorfor unngå disse? Disse virkestoffene kan øke hudens reaktivitet, midlertidig svekke hudbarrieren og forsterke følelser (varme/prikking) under en lett behandling. Dette kan føre til ubehag, rødhet eller irritasjon. For best komfort, planlegg LuxLift på «milde dager»: rens + mild toner + valgfritt vannbasert serum + LuxLift + Lumiereva + fuktighet.

FOTOSENSIBILISERENDE MEDISINER

Fotosensibiliserende medisiner og behandlinger (viktig) Noen medisiner og kliniske hudbehandlinger kan øke fotosensibiliseringen.

Hvis du bruker fotosensibiliserende medisiner, vær ekstra forsiktig og kontakt lege hvis du er usikker. Start veldig forsiktig (lav intensitet og kort tid) og avbryt bruken hvis du føler ubehag.